

Informe generado el 04-11-2022 16:56:53

Test de linealidad aérea:

En este test se busca encontrar la linealidad del test aéreo de 60 a 20 dBHL en todas sus frecuencias a pasos de 5 dBHL.

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 750 Hz | 1000 Hz | 1500 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz | 6000 Hz | 8000 Hz |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |

Test de linealidad ósea:


En este test se busca encontrar la linealidad del test óseo de 30 a -10 dBHL, en todas sus frecuencias a pasos de 5 dBHL.

| 250 Hz | 500 Hz | 750 Hz | 1000 Hz | 1500 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz | 4000 Hz |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

Test de tono pulsante:

En este test se busca encontrar los tiempos de Rise time, Fall time, On time y On/Off time del tono pulsante.

| Tiempos [ms] | Resultado |
|--------------|-----------|
| Rise time | 33.29 |
| Fall time | 33.38 |
| On time | 191.59 |
| On/Off time | 205.49 |

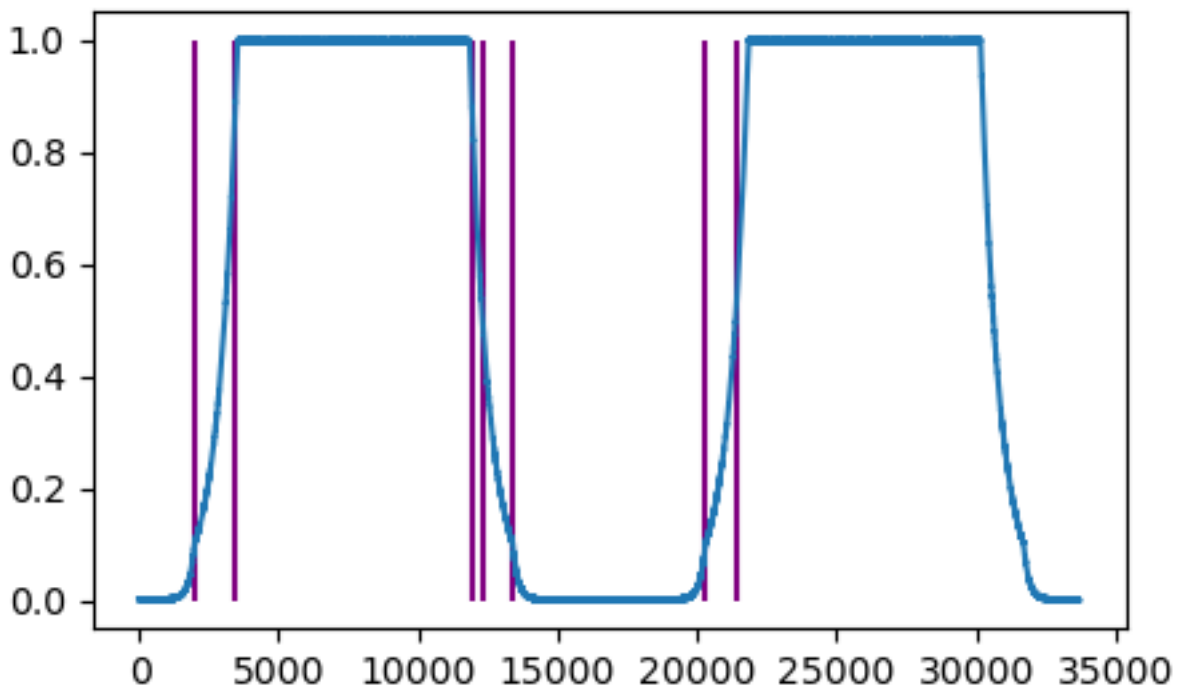

Test de nivel vocal:

Para este test se grabaran a 85 dBHL el conjunto de palabras sin silencio de las listas:

- * Dr. Tato adultos
- * Dr. Tato niños
- * SRT E IRF (masculino)
- * SRT E IRF (femenino)
- * Audicom


| Lista | Nivel vocal [dBHL] |
|-----------------------|--------------------|
| Dr. Tato adultos | 50.5 |
| Dr. Tato niños | 50.5 |
| SRT E IRF (masculino) | 50.5 |
| SRT E IRF (femenino) | 50.5 |
| Audicom | 50.5 |


Test de respuesta en frecuencia: (A venir)


Test de ruido:

Para este test se graban a 70 dBHL 3 tipos de ruido: Blanco, Vocal y NBN a 1kHz. Para su representación, se observa una tabla con los valores obtenidos y la respuesta en frecuencia de cada uno.

| Tipo | Nivel [dBSPL] |
|--------------|---------------|
| Ruido blanco | 57.55 |
| Ruido vocal | 66.54 |
| NBN 1kHz | 59.4 |

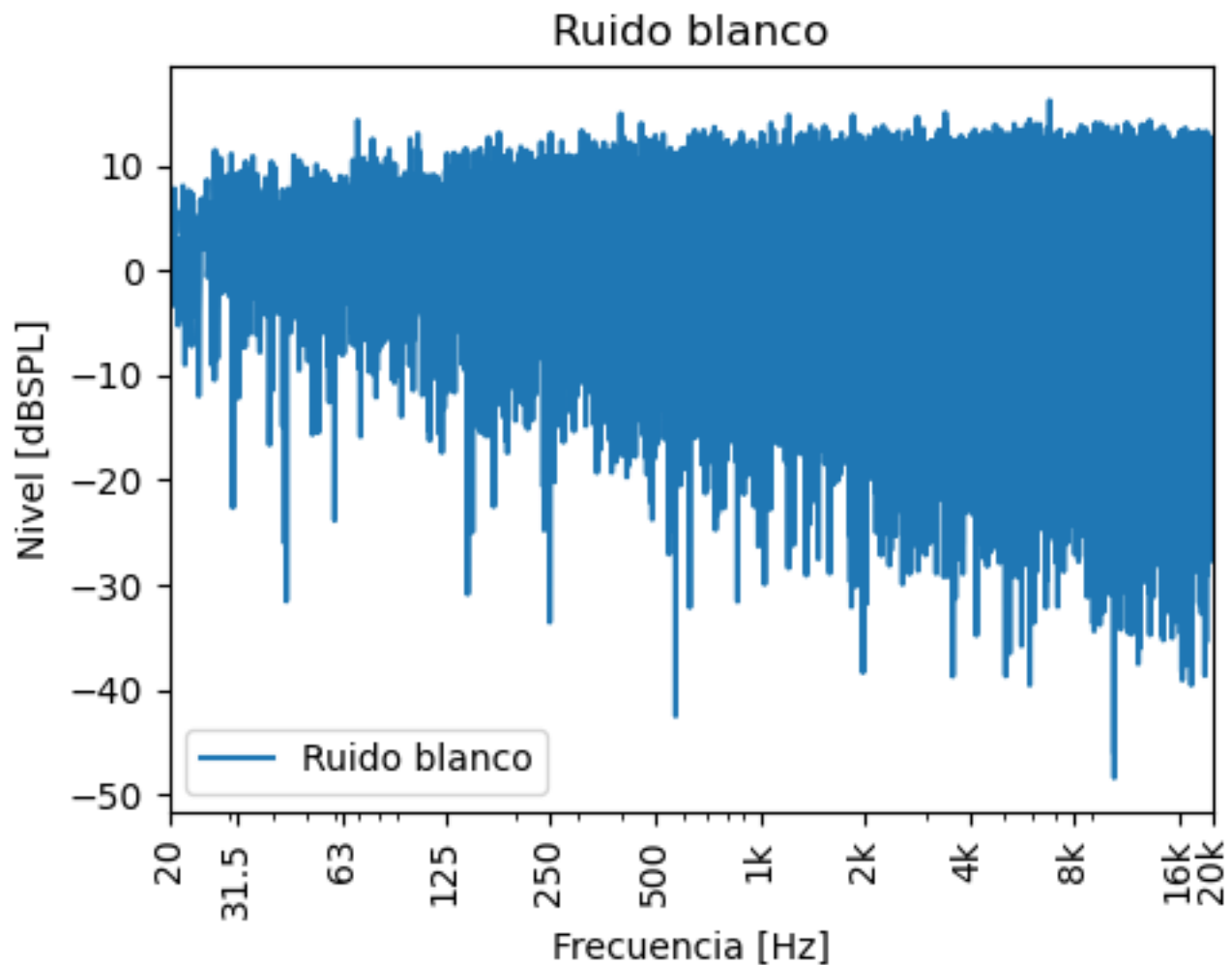

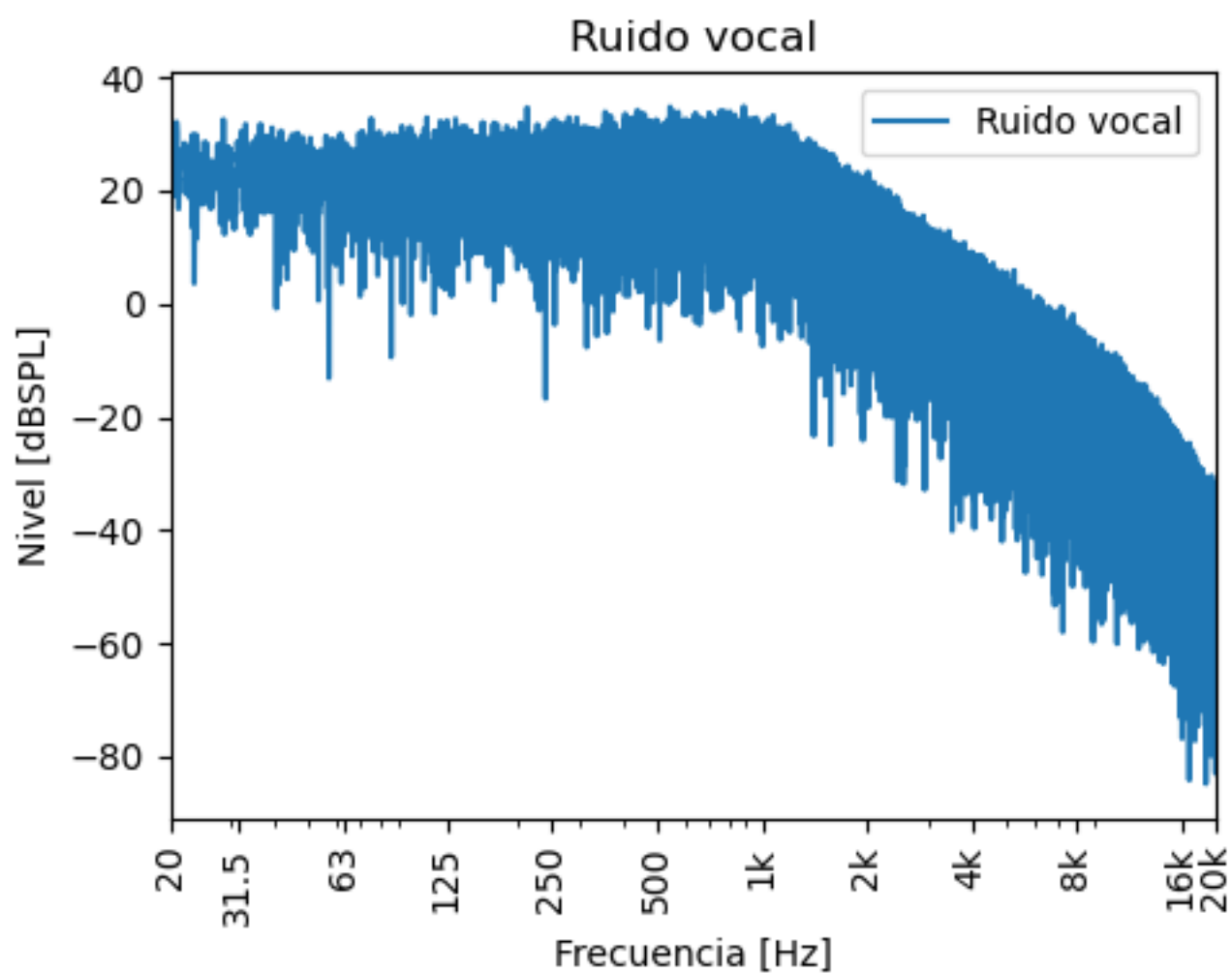

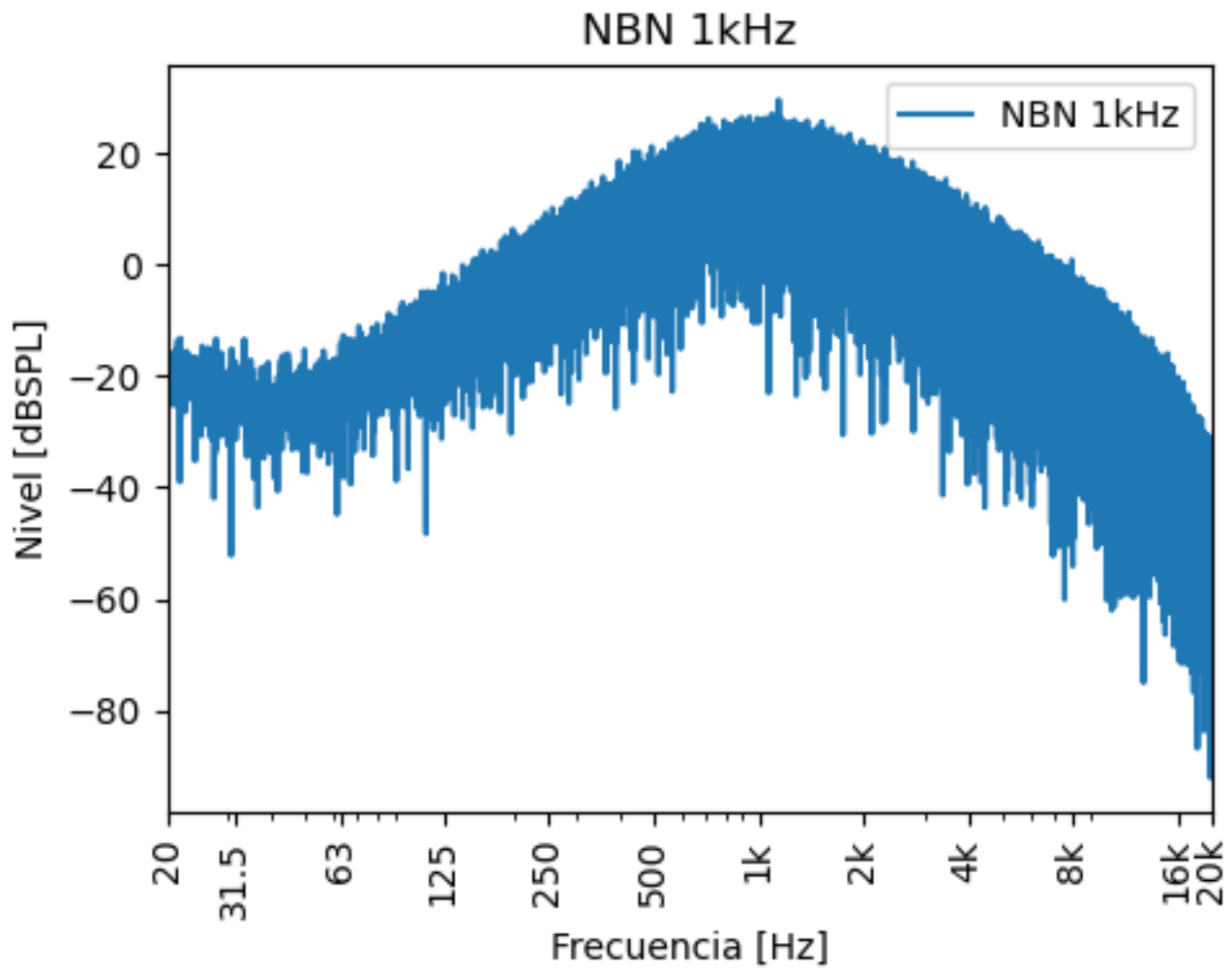

Test de warble Tone:

Para este test se buscan las frecuencia de mensaje y moduladora del Warble Tone.

| Carrier frequency [Hz] | Modulating frequency [Hz] |
|------------------------|---------------------------|
| 125.0 | 5.0 |
| 250.0 | 5.0 |
| nan | 5.0 |
| 750.0 | 5.0 |
| 1000.0 | 5.0 |
| 1500.0 | 5.0 |
| 2000.0 | 5.0 |
| nan | 4.5 |
| 4000.0 | 4.5 |
| nan | 5.0 |
| nan | 5.0 |